




SPYCRA[®] Max A
SUPERABSORBIERENDE, SANFT-HAFTENDE WUNDAUFLAGE

SPYCRA® Max A

Superabsorbierende, sanft-haftende Wundauflage (adhesive)

Trotz vieler einzelner Schichten ist SPYCRA® Max A weich und anschmiegsam, bei einem sehr hohen Tragekomfort. Die blaue, atmungsaktive Vliesstoffschicht von SPYCRA® Max A verhindert, dass Exsudat aus der Wundauflage austreten kann. Eine feuchtigkeitsregulierende Gewebeschicht befördert das Exsudat schnell und zuverlässig in das superabsorbierende Polster und schließt das Exsudat sicher ein. Eine selbsthaftende Silikon-Wundkontaktschicht erleichtert die Applikation und sorgt für einen atraumatischen Verbandwechsel.

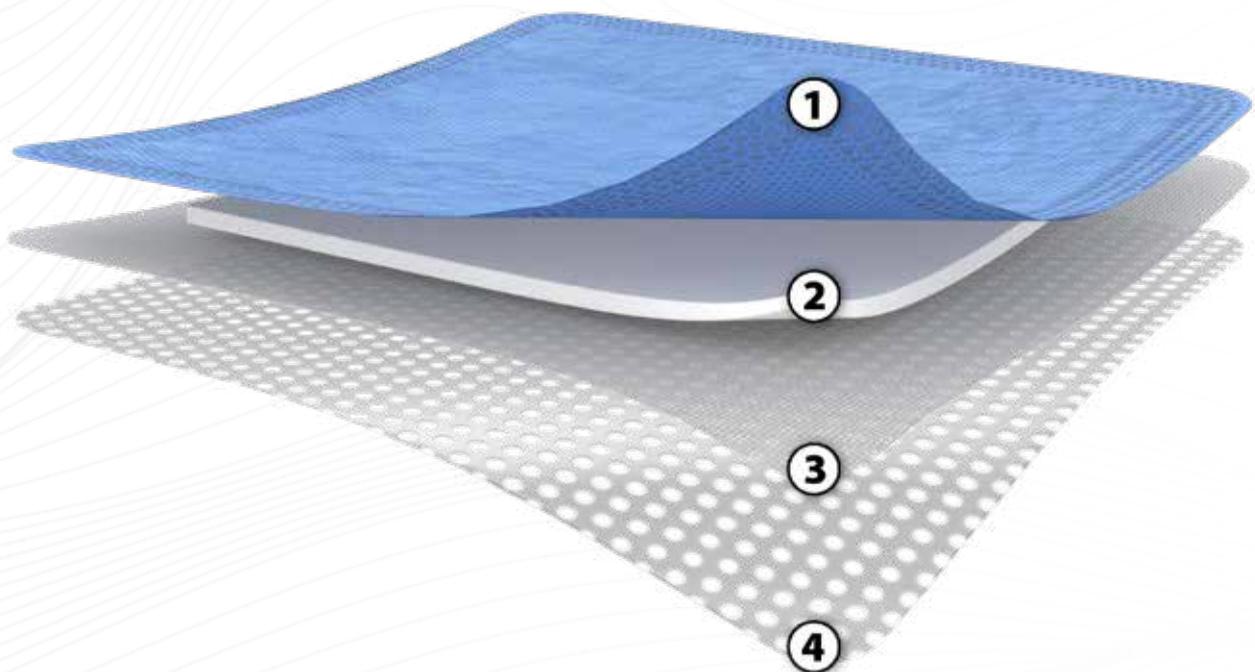


[1] SPYCRA® Max A
Detailansicht der blauen und atmungsaktiven Vliesstoffschicht

[2] SPYCRA® Max A
Detailansicht des superabsorbierenden Polsters

[3] SPYCRA® Max A
Detailansicht des feuchtigkeitsregulierenden Gewebes

[4] SPYCRA® Max A
Detailansicht der selbsthaftenden Silikon-Wundkontaktschicht

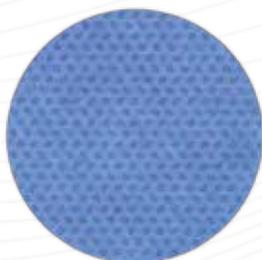

Leistungen

- ✓ Exzellentes Exsudatmanagement mit hoher Kapazität
- ✓ Hervorragende Flüssigkeitskontrolle
- ✓ Minimiert das Risiko von Mazeration und Leckagen
- ✓ Schnelle Absorption
- ✓ Hält die Wundflüssigkeit und ihre Bestandteile zurück
- ✓ Nicht durchschlagend dank der Rückenbeschichtung

Exsudatmenge (E)

kein /gering

mäßig 

stark 

sehr stark 

Wundphase (P)

Nekrose 

Fibrinbelag 

Granulation 

Epithelisierung 

Infektion 

Wundtiefe (W)

flach 

tief 

SPYCRA® Max A

SPYCRA® Max A ist eine sterile, sanft haftende, superabsorbierende Wundauflage zur Verwendung bei mäßig bis stark exsudierenden Wunden. Der mehrschichtige Aufbau erleichtert das Flüssigkeitsmanagement und sorgt für ein optimales, feuchtes Wundmilieu, welches zu einer schnelleren Wundheilung führt. Eine hervorragende Absorption und der sichere Einschluss von Exsudat minimiert das Risiko einer Mazeration und einer Schädigung der Haut in der Wundumgebung.

SPYCRA® Max A ist indiziert für die Behandlung von mäßig bis stark exsudierenden Wunden, einschließlich Beingeschwüren, Druckgeschwüren, diabetischen Fußgeschwüren und Wunddehiszenzen nach chirurgischen Eingriffen. SPYCRA® Max A kann sowohl als Primärverband als auch als Sekundärverband verwendet werden.



Leistungen

- ✓ Exzellentes Exsudatmanagement mit hoher Kapazität
- ✓ Hervorragende Flüssigkeitskontrolle
- ✓ Minimiert das Risiko von Mazeration und Leckagen
- ✓ Schnelle Absorption
- ✓ Hält die Wundflüssigkeit und ihre Bestandteile zurück
- ✓ Nicht durchschlagend dank der Rückenbeschichtung

Indikationen

- ✓ Beingeschwüre
- ✓ Diabetische Fußgeschwüre
- ✓ Druckgeschwüre
- ✓ Wunddehiszenzen nach chirurgischen Eingriffen

	Größe Wundauflage (Pad)	Zusatzinformation	VE	PZN	REF
XS	7,5 cm x 7,5 cm (5 cm x 5 cm)	extra small	1 x 10	18179011	SP-7575-M-A
S	10 cm x 10 cm (7,5 cm x 7,5 cm)	small	1 x 10	18179028	SP-1010-M-A
M	15 cm x 15 cm (12 cm x 12 cm)	medium	1 x 10	18179034	SP-1515-M-A
L	15 cm x 20 cm (12 cm x 17 cm)	large	1 x 10	18179063	SP-1520-M-A
XL	20 cm x 20 cm (17 cm x 17 cm)	extra large	1 x 5	18179086	SP-2020-M-A
XXL	20 cm x 30 cm (17 cm x 24 cm)	double extra large	1 x 5	18179092	SP-2030-M-A

*L+F Medizinprodukte GmbH
Birkenweiher Straße 4
63505 Langenselbold /Germany*

Phone: +49 6184 99 53 357

Fax: +49 6184 99 53 358

E-Mail: info@lf-med.de

www.lf-medizinprodukte.de | www.therakit.de