



SPYCRA  **Max**


SUPERABSORBIERENDE, NICHT-HAFTENDE WUNDAUFLAGE

23
2023 / 01

SPYCRA® Max

Superabsorbierende, nicht-haftende Wundauflage (non-adhesive)

Trotz vieler einzelner Schichten ist SPYCRA® Max weich und anschmiegsam, bei einem sehr hohen Tragekomfort. Die blaue, atmungsaktive Vliesstoffschicht [1] von SPYCRA® Max verhindert, dass Exsudat aus der Wundauflage austreten kann. Eine feuchtigkeitsregulierende Gewebeschicht [3] befördert das Exsudat schnell und zuverlässig in das superabsorbierende Polster [2] und schließt das Exsudat sicher ein.

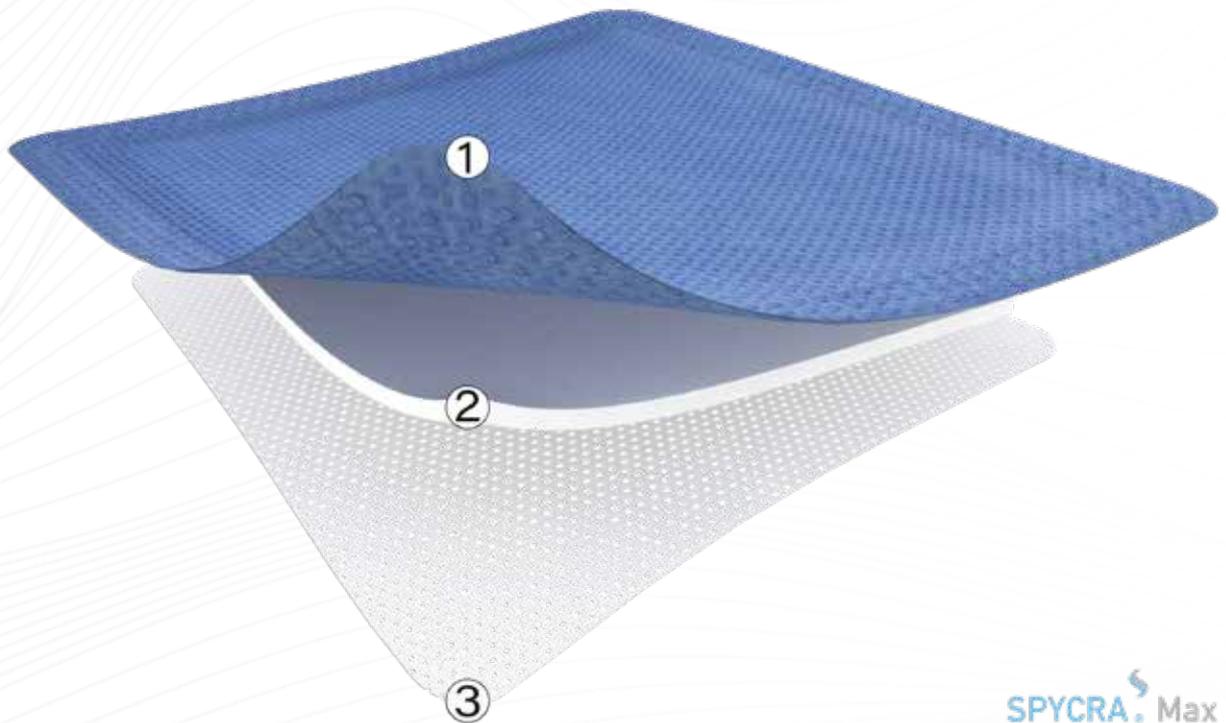


SPYCRA® Max

[1] SPYCRA® Max
Detailansicht der blauen und atmungsaktiven Vliesstoffschicht

[2] SPYCRA® Max
Detailansicht des superabsorbierenden Polsters

[3] SPYCRA® Max
Detailansicht der feuchtigkeitsregulierenden Gewebeschicht

[4] SPYCRA® Max
Detailansicht Wundauflage Vorder- /Rückseite

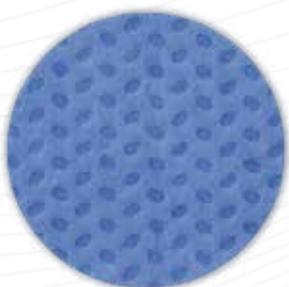

Leistungen

- ✓ Exzellentes Exsudatmanagement mit hoher Kapazität
- ✓ Hervorragende Flüssigkeitskontrolle
- ✓ Minimiert das Risiko von Mazeration und Leckagen
- ✓ Schnelle Absorption
- ✓ Hält die Wundflüssigkeit und ihre Bestandteile zurück
- ✓ Nicht durchschlagend dank der Rückenbeschichtung

Exsudatmenge (E)

kein /gering

mäßig 

stark 

sehr stark 

Wundphase (P)

Nekrose 

Fibrinbelag 

Granulation 

Epithelisierung 

Infektion 

Wundtiefe (W)

flach 

tief 

SPYCRA® Max

SPYCRA Max ist ein steriler, nicht-haftender, superabsorbierender Verband zur Verwendung bei stark exsudierenden Wunden. Der mehrschichtige Aufbau erleichtert das Flüssigkeitsmanagement und sorgt für ein optimales, feuchtes Wundmilieu, welches zu einer schnelleren Wundheilung führt. Eine hervorragende Absorption und der sichere Einschluss von Exsudat minimiert das Risiko einer Mazeration und einer Schädigung der Haut in der Wundumgebung.

SPYCRA® Max ist indiziert für die Behandlung von mäßig bis stark exsudierenden Wunden, einschließlich Beingeschwüren, Druckgeschwüren, diabetischen Fußgeschwüren und Wunddehiszenzen nach chirurgischen Eingriffen. SPYCRA® Max kann sowohl als Primärverband als auch als Sekundärverband verwendet werden.



Leistungen

- ✓ Exzellentes Exsudatmanagement mit hoher Kapazität
- ✓ Hervorragende Flüssigkeitskontrolle
- ✓ Minimiert das Risiko von Mazeration und Leckagen
- ✓ Schnelle Absorption
- ✓ Hält die Wundflüssigkeit und ihre Bestandteile zurück
- ✓ Nicht durchschlagend dank der Rückenbeschichtung

Indikationen

- ✓ Beingeschwüre
- ✓ Diabetische Fußgeschwüre
- ✓ Druckgeschwüre
- ✓ Wunddehiszenzen nach chirurgischen Eingriffen

	Größe Wundauflage (Pad)	Zusatzinformation	VE	PZN	REF
XS	7,5 cm x 7,5 cm (5 cm x 5 cm)	extra small	1 x 10	18409020	SP-7575-M
S	10 cm x 10 cm (7,5 cm x 7,5 cm)	small	1 x 10	18409037	SP-1010-M
M	15 cm x 15 cm (12 cm x 12 cm)	medium	1 x 10	18409043	SP-1515-M
L	15 cm x 20 cm (12 cm x 17 cm)	large	1 x 10	18409066	SP-1520-M
XL	20 cm x 20 cm (17 cm x 17 cm)	extra large	1 x 5	18409072	SP-2020-M
XXL	20 cm x 30 cm (17 cm x 24 cm)	double extra large	1 x 5	18409089	SP-2030-M

*L+F Medizinprodukte GmbH
Birkenweiher Straße 4
63505 Langenselbold /Germany*

Phone: +49 6184 99 53 357

Fax: +49 6184 99 53 358

E-Mail: info@lf-med.de

www.lf-medizinprodukte.de | www.therakit.de